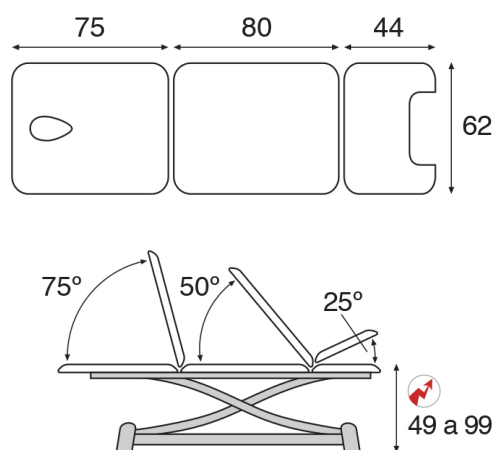


FICHA TÉCNICA C7981**Características generales**

Camilla eléctrica tijera gris especialidades.

Dimensiones del lecho estándar: 62x200 cm (M47)

Dimensiones de lecho opcional: 70x200 cm (M67)

Peso máximo recomendado: 200 Kg

Variación de altura: 49-99 cm

Regulación de altura mediante motor eléctrico con accionamiento periférico.

Elevación vertical sin desplazamiento lateral.

Estructura fabricada en tubo de acero, recubierta de pintura gris polvo epoxi cocida en horno a 250°C

Patas de 90 mm de diámetro. Con nivelador ajustable en cada una de las patas.

Ruedas escamoteables mediante pedal. Solo desplazamiento de la camilla en vacío, NO para el transporte de pacientes.

Portarrollos abatible cromado incorporado de serie.

Respaldo standard tipo T13 - Respaldo rectangular. Orificio lágrima con tapón incluido.

Perneras articuladas (A4705) regulables en altura y extraíbles.

Bandeja extraíble en acero inoxidable de 15x30x4 cm.

Módulo del cabezal/respaldo regulable mediante pistón hidráulico.

Módulo central regulable manualmente, mediante pomo/palanca.

Módulo de la parte pies regulable manualmente, mediante cremallera.

Peso aproximado: 87 Kg

Características del Tapizado

Tapizado en polipiel ignífugo Clase: M-2 según normativa CE.
Con protección antimicrobiana y antibacteriana Sanitized®.
Disponible en 25 colores.

Grosor de la espuma 5 cm.

Espuma grado de firmeza II - Medio


Características del Motor Eléctrico

Carrera de 300 mm
Motor Asíncrono de 1-230V. AC $\pm 10\%$
Protección Térmica integrada
Fuerza Nominal: 8000N - Velocidad Nominal: 14mm/s
Voltaje: 230V/50-60 HZ - Consumo Corriente: 3,7A
Ciclo de Trabajo: 25s encendido / 400s apagado
Clase de Seguridad: II - Protección Estándar: IPX4
Cumple directiva interferencias electromagnéticas





TECHNICAL FEATURES C7981

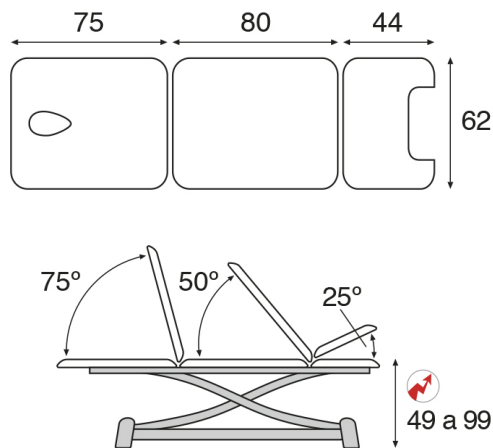

General characteristics

Electric grey scissor-shaped speciality table.

Standard upholstery dimensions: 62x200 cm (M47)

Optional upholstery dimensions: 70x200 cm (M67)

Recommended maximum weight: 200 Kg

Height variation: 49-99 cm

Electric motor-controlled height adjustable by side rails system.

Height adjustment without side misalignment

Steel frame with grey epoxy powder coating heated at 250°C

90 mm diameter steel legs. With 4 table levellers, one in each leg.

Retractable castors with foot lever. Just for moving the table around, NOT intended for patient transportation.

Detachable chrome paper roll holder included as standard.

Standard backrest type T13 - Square backrest. Oval breather hole and bung included.

Articulated leg supports (A4705) height adjustable and removable.

Stainless steel removable tray 15x30x4 cm.

Head-/Backrest adjustable by gas spring.

Central section adjustable manually, by knob/lever.

Feet section adjustable manually, by rack.

Approx. weight: 87 Kg

Upholstery Features

Fire-resistant Class M2 artificial leather, EC compliant.
Sanitized® anti-microbial and antibacterial protection.
Available in 25 colours.

Foam thickness 5 cm.

Foam firmness II - Soft


Electric Motor Features

Stroke length: 300 mm
Asynchronous motor 1-230V. AC $\pm 10\%$
Integrated thermal protection
Max. Power: 8000N - Average speed at load 0: 14mm/s
Voltage: 230V/50-60 Hz - Power consumption: 3,7A
Working cycle: 25s non stop / 400s off
Safety class: II - Standard protection: IPX4
EMI (electromagnetic interference) Directive compliant





CARACTERISTIQUES TECHNIQUES C7981

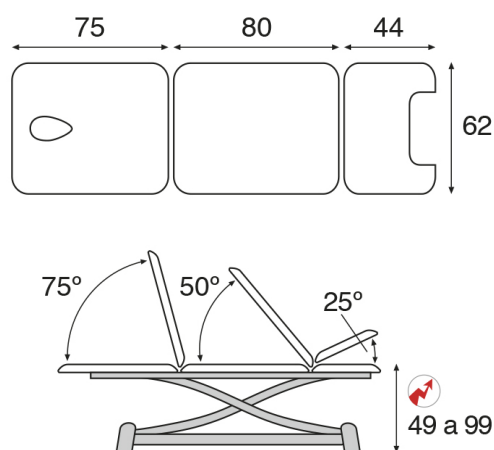

Caractéristiques générales

Table électrique ciseaux gris spécialités.

Dimensions standard de la sellerie: 62x200 cm (M47)

Dimensions optionnelles de la sellerie: 70x200 cm (M67)

Charge maximale recommandée: 200 Kg

Variation de la hauteur: 49-99 cm

Système de réglage de hauteur par système périphérique avec moteur.

Elévation verticale sans déport latéral.

Structure fabriquée en tube d'acier laqué avec peinture gris époxy cuite au four à 250°C

Pieds de 90 mm de diamètre. Avec 4 vis de compensation de sol, une sous chaque pied.

Roulettes escamotables actionnement par pédale (pour déplacement à vide uniquement, pas pour transport patients).

Porte-rouleau chromé rabattable inclus de série.

Dossier standard type T13 - Dossier rectangulaire. Cavité visage en forme de goutte et bouchon inclus.

Jambières articulées (A4705) réglables en hauteur et amovibles.

Cuvette de 15x30x4 cm en acier inoxydable et amovible.

Tête/dossier réglable par vérin à gaz.

Partie centrale réglable manuellement, avec pommeau/manette.

Plateau jambes réglable manuellement, avec crémaillère.

Poids approx: 87 Kg

Caractéristiques Sellerie


Revêtement en simili cuir ignifuge de catégorie M2, conforme aux normes CE.
Protection antimicrobienne et antibactérienne Sanitized®.
Disponible en 25 coloris.

Épaisseur de la mousse 5 cm.

Soutien de mousse II - Équilibré

Caractéristiques Moteur Électrique

Course du vérin: 300 mm
Moteur asynchrone 1-230V. AC $\pm 10\%$
Protection thermique intégrée
Puissance max: 8000N - Vitesse moyenne en charge 0:
14mm/s
Voltage: 230V/50-60 Hz - Consommation électrique: 3,7A
Cycle de travail: 25s en continu/ 400s en arrêt
Norme de sécurité: II - Protection standard: IPX4
Conforme à la directive européenne en matière de perturbations électromagnétiques

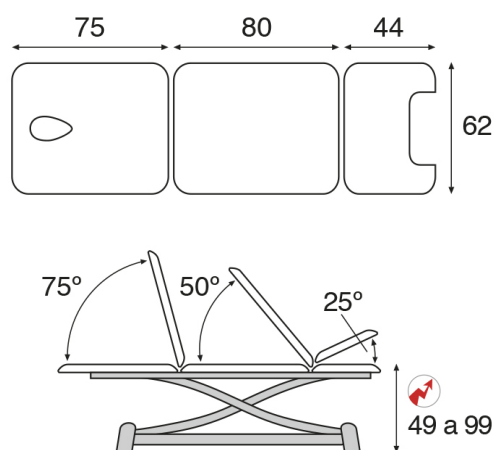TECHNISCHES DATENBLATT C7981**Allgemeine Eigenschaften**

Elektrische Spezial-Therapieliege mit grauer Scherenkonstruktion

Masse der Standardsegmenten: 62x200 cm (M47)

Masse der optionalen Segmenten: 70x200 cm (M67)

Maximale Hubkraft: 200 Kg

Höhenverschiebung: 49-99 cm

Höhenverstellung durch elektrischen Motor mit Rundumschaltung.

Höhenverstellung ohne seitliche Verschiebung.

Untergestell aus Stahlrohr, beschichtet mit grauen Epoxy-Pulver im Ofen bei 250 ° C gebrannt.

Die Standbeine des Untergestelles haben 90mm Durchmesser. Mit Niveauausgleicher bei jedem Standfuss dabei.

Einziehbare Räder durch Fusspedal schaltbar. Das Verschieben der Liege nur ohne Gewicht, NICHT für den Transport von Patienten geeignet.

Schwenkbarer verchromter Rollenhalter bei Standardausführungen dabei.

Standard- Rückenteil Typ T13 - Rechteckiges Rückenteil. Ovaler Nasenschlitz mit Abdeckpolster inklusive

Beinstützen (A4705) schwenkbar und verstellbar in Höhe und ausziehbar.

Ausziehbare Edelstahlschale von 15x30x4 cm.

Kopfteil/ Rückenteil verstellbar durch Gasdruckfeder.

Mittelteil ist manuel verstellbar durch Knopf / Hebel.

Beinteil ist manuel verstellbar durch Klemmsystem.

Ungefähres Gewicht: 87 Kg.

Eigenschaften der Polsterung

Gepolstert mit feuerhemmendem Kunstleder Klasse: M-2 gemäß CE-Vorschriften.

Mit Sanitized® antimikrobieller und antibakterieller Schutz
Verfügbarkeit in 25 Farben.

Dicke des Schaumstoffes 5 cm.

Härtegrad des Schaumstoffes II - Ausgeglichen

Eigenschaften des elektrischen Motors

Hub 300 mm

Asynchronmotor von 1-230V. AC $\pm 10\%$

Integrierter Wärmeschutz

Nennkraft : 8000N – Nenngeschwindigkeit : 14 mm / s

Spannung: 230V/50-60HZ – Aufnahmeleistung : 3,7A

Einschaltdauer: 25sek. an / 400 sek. aus

Schutzklasse: II – Gehäuse der Steuereinheit : IPX4

Entspricht den Anweisungen für elektromagnetische
Störungen



